

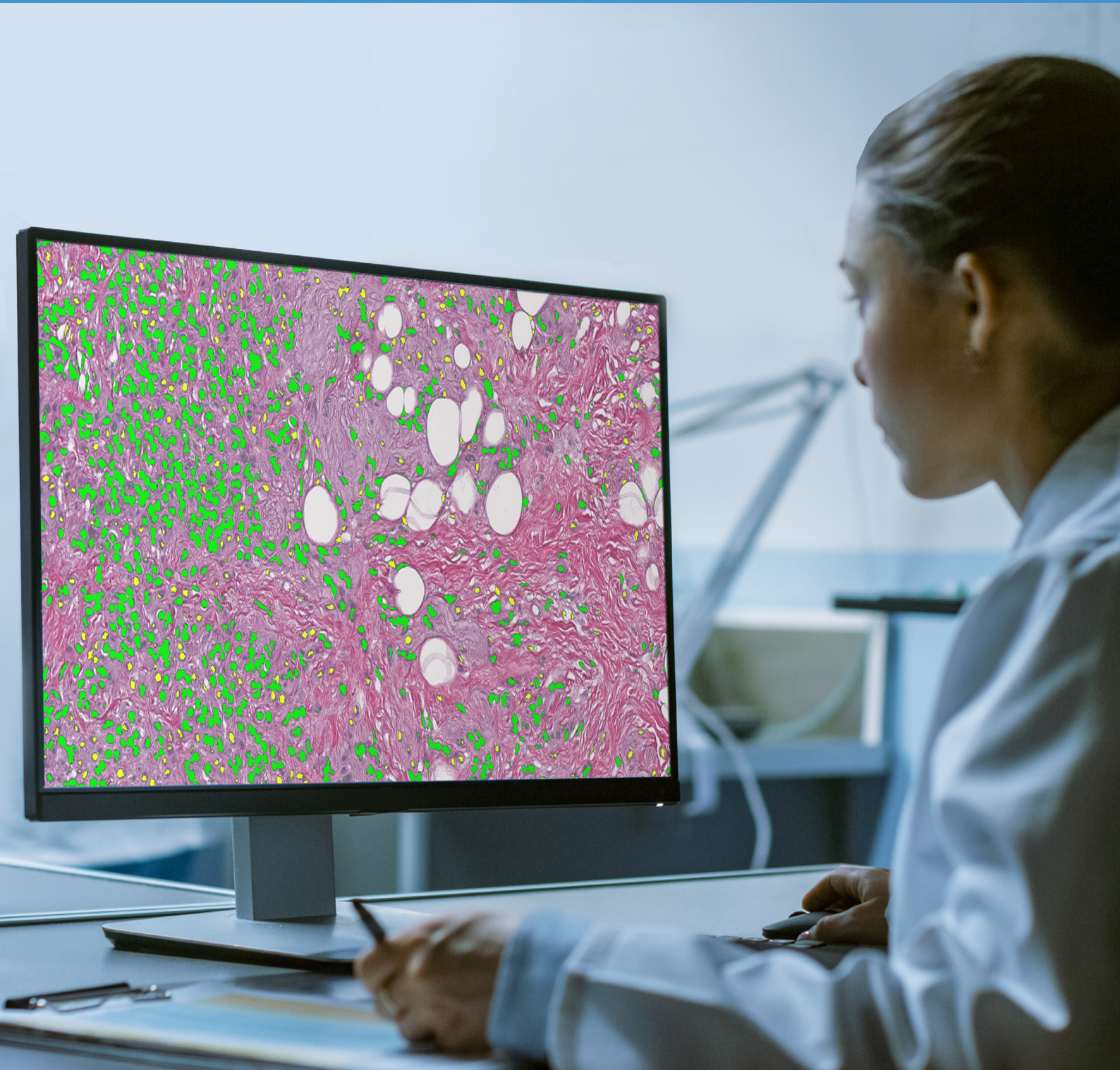
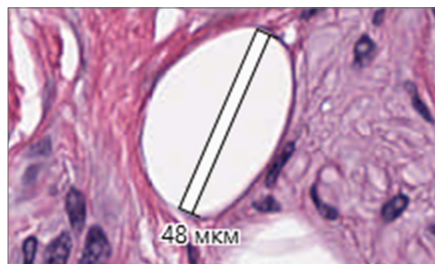


Цифровые слайд-сканеры

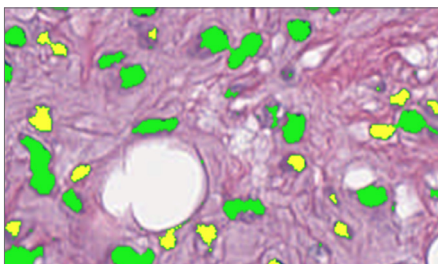

Аппликационный модуль

Vision Slide

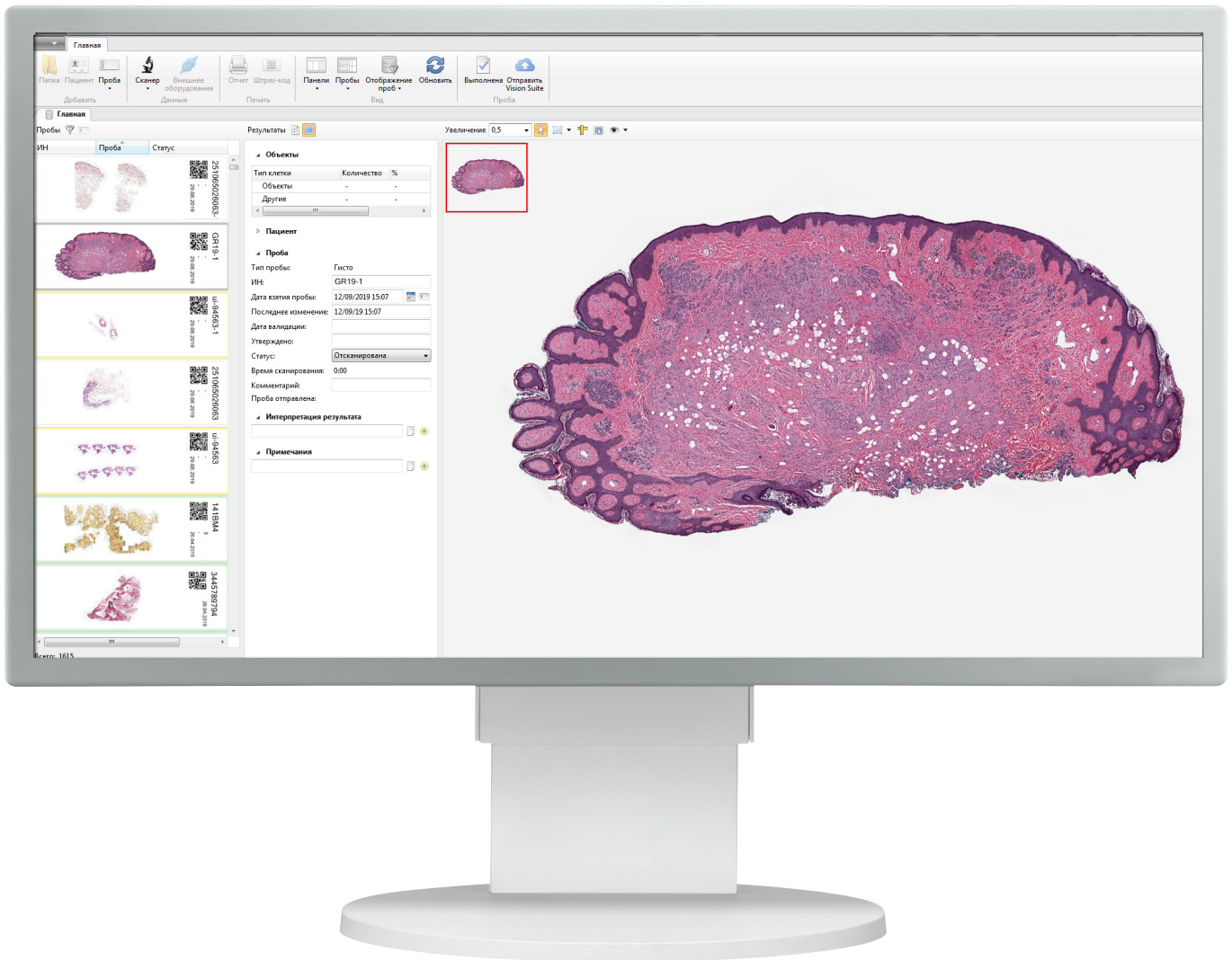

Анализ объектов

Классификация объектов анализа по необходимым критериям

Подсчет и классификация


Автоматическая или ручная идентификация объектов на изображении. Измерение линейных и оптических параметров.

Комментарии и метки

Оставляйте комментарии и метки к изображению цифрового препарата

Административный модуль

Vision Remote

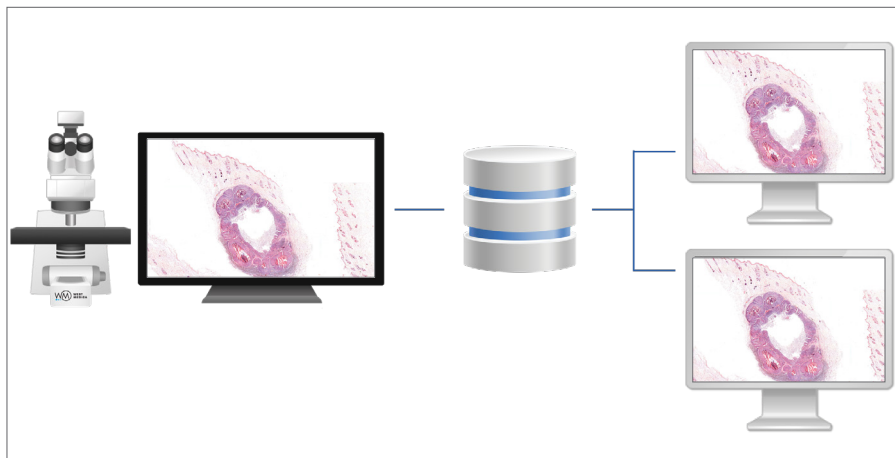

Удаленное рабочее место.

Модуль для консультации и обучения

Vision Suite

The screenshot shows the Vision Suite web interface. The browser address bar displays 'vision-suite.com'. The page title is 'Пробы (59)'. The interface includes a search bar and a list of histology slides. The table below represents the data shown in the screenshot.

<input type="checkbox"/>	Предпросмотр	LIS	Дата взятия пробы	I/Н	Проба	Размер	Комментарий
<input type="checkbox"/>		<>	12/05/2018, 5:49 PM	2850	Histo		
<input type="checkbox"/>		<>	12/05/2018, 5:46 PM	2849	Histo		
<input type="checkbox"/>		<>	12/05/2018, 5:44 PM	2848	Histo		
<input type="checkbox"/>		<>	12/05/2018, 5:39 PM	2847	Histo		
<input type="checkbox"/>			12/05/2018, 7:33 PM	4914	Histo		
<input type="checkbox"/>			12/05/2018, 7:33 PM	4558	Histo		
<input type="checkbox"/>			12/05/2018, 7:32 PM	4557	Histo		

Облачная/серверная платформа для телемедицины и консультации с коллегами.


Спецификации



Vision Assist
Cell Imaging Analyzer



Vision Pro
Cell Imaging Analyzer

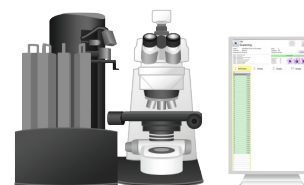

Vision Ultimate
Cell Imaging Analyzer

Аппликационный модуль: Vision Slide	Аппликационный модуль: Vision Slide	Аппликационный модуль: Vision Slide
Режим работы: очередь (только для 4 слайдов)	Режим работы: очередь, произвольный доступ	Режим работы: очередь, непрерывный и произвольный доступ, срочная проба, 24/7
Автоматическое сканирование	Автоматическое сканирование	Автоматическое сканирование
1 или 4 слайда	8 слайдов	До 200 слайдов
Ручная подача через замену слайда / слайдов	2 кассеты для слайдов	Автоматическая загрузка слайдов
Сканирующий микроскоп	Сканирующий микроскоп	Сканирующий микроскоп
Персональный компьютер	Персональный компьютер	Персональный компьютер
Монитор	Монитор	Монитор
—	—	Управляющий тач-монитор
—	Встроенный считыватель штрих-кодов (опционально)	Встроенный считыватель штрих-кодов
—	Податчик иммерсионного масла (опционально)	Податчик иммерсионного масла (опционально)
Объектив: 20x*	Объектив: 20x*	Объективы: 10x, 20x*
Светлое поле	Светлое поле	Светлое поле
Освещение по Келлеру, LED	Освещение по Келлеру, LED	Освещение по Келлеру, LED
Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7	Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7	Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7
Art. N.: 71150.00.011 (1 слайд) Art. N.: 71450.00.011 (4 слайда)	Art. N.: 72852.00.011 (8 слайдов)	Art. N.: 73051.00.011 (200 слайдов)

* Полный список доступных опций уточняйте при заказе

Патенты Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент)

№ 2 794 050

Способ автофокусировки при оцифровке микроскопического препарата

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



West Medica Produktions- und Handels-GmbH
Brown-Boveri-Straße 6, B17-1
2351 Wiener Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
vienna@westmedica.com, www.wm-vision.com

Официальный дистрибьютер в России:
ООО «Медика Продакт»
ул. Шереметьевская, 85, стр. 5, Москва, 129075
тел.: +7 (495) 787-44-01, факс: +7 (495) 787-44-01
info@medicaprodukt.ru, www.wm-vision.ru